

FILLMED
LABORATOIRES

NCTF[®], M-HA[®] 10 &
NANOSOFT[™]

EINE NEUE DIMENSION

DER HAUTREVITALISIERUNG


#estheticverliebt

HAUTALTERUNG SCHLÜSSELROLLE DER FIBROBLASTEN


FIBROBLASTEN, BEDEUTUNGSVOLLE ZELLEN IN DER DERMIS^[2]

- Kollagenneubildung
- Elastinproduktion
- Herstellung von Hyaluronsäure
- Zentrale Bedeutung für die Erhaltung eines frischen & gesunden Aussehens der Haut

JUNGE HAUT GESUNDE FIBROBLASTEN

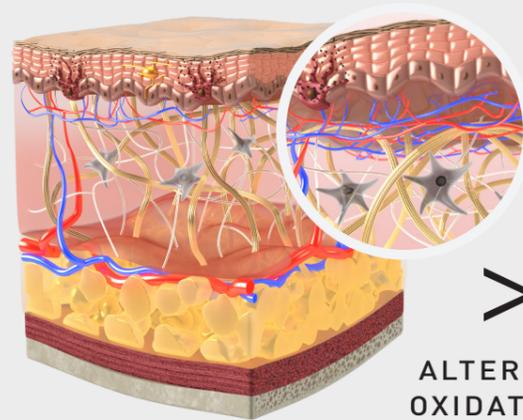

REIFE HAUT GEALTERTE FIBROBLASTEN

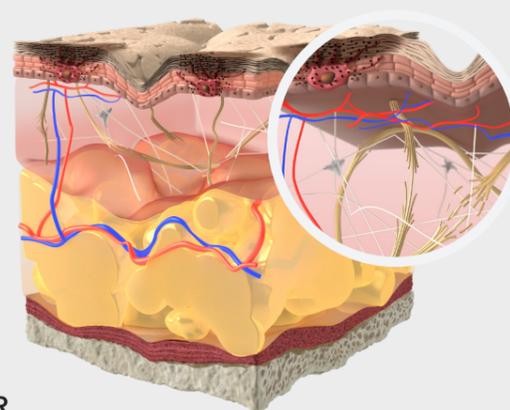

ALTERUNG
OXIDATIVER
STRESS

Abnahme der Qualität und Quantität von Kollagen - Elastin - Hyaluronsäure

Unausgewogenes Verhältnis zwischen antioxidativem Schutz und freien Radikalen

[2] Polycomponent mesotherapy formulations for the treatment of skin aging and improvement of skin quality, Sergey Prikhnenko, Clinical, Cosmetic, Investigational Dermatology 2015:8 151-157.

NCTF[®] 135 HA FÜR EINEN PRO-AGEING EFFEKT IN GESICHT - HALS - DEKOLLETÉ



EINES DER BESTEN
PRODUKTE IN DER
ÄSTHETIK¹
HYALURONSÄURE +
POLYREVITALISIERENDER
KOMPLEX MIT 59
INHALTSSTOFFEN

BILDET EIN
OPTIMALES
UMFELD FÜR
FIBROBLASTEN

DURCH STUDIEN
BELEGTE
WIRKSAMKEIT
IN DER DERMIS


IN-VITRO STUDIE^[2]

- +148% **FIBROBLASTEN STIMULATION**
Ergebnisse auf gealterte Fibroblasten.
NCTF Konzentration 60%
- +256% **KOLLAGEN STIMULATION**
Ergebnisse auf gealterte Fibroblasten, Extrazellulär.
NCTF Konzentration 60%
- 90% **FREIE RADIKALE**
NCTF Konzentration 1%


IN-VIVO STUDIE^[3]

- +24% **HAUTDICHTHE**
- +20% **HAUTDICKE**
- > **FESTIGENDER & STRAFFENDER EFFEKT**

PRE D0

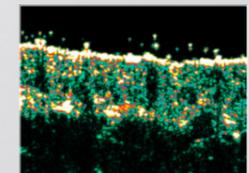

POST D120

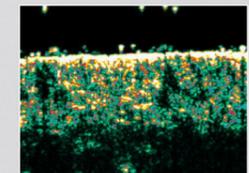

HOCHFREQUENZ
HAUT-ULTRASCHALL

[1] Ausgezeichnet als eines der besten Produkte der letzten 20 Jahre in der Ästhetik von der Polish Association of Aesthetic Dermatology, 2018.

[2] Polycomponent mesotherapy formulations for the treatment of skin aging and improvement of skin quality, Sergey Prikhnenko, Clinical, Cosmetic, Investigational Dermatology 2015:8 151-157.

[3] Klinische Bewertung der Anti-Aging-Wirkung der Mesotherapie mit NCTF[®] 135 HA bei gesunden Probanden, 2014. Offene, einzentrige und prospektive Studie. 20 Patienten eingeschlossen (durchschnittlich 49,25 Jahre alt), 2 von ihnen verließen die Studie. 3 Sitzungen im Abstand von 15 Tagen und 2 Sitzungen im Abstand von 30 Tagen.

NCTF® 135 HA

INHALTSSTOFFE

VERBESSERUNG der Hautqualität, Behandlung feiner Fältchen sowie zur Straffung strapazierter & matter Haut.

BIOREVITALISIERUNG für Vitalität, Spannkraft, Elastizität, Festigkeit, Strahlkraft & Glow.

Injektionstiefen Mehrschichtig:

Epidermal – Quaddeln: Ausstrahlung & Hydratisierung
Intradermal – Papeln: Feine Linien und Fältchen
Subdermal – Fächern mit Kanüle: Tonizität & Dichte



15 HYALURONSÄURE | Hydratation der Haut
(mg/3ml Vial) Unvernetztes Natrium-Hyaluronat

12 VITAMINE | Stimulation der Kollagensynthese & Neutralisation freier Radikale

[Acide Ascorbique (Vit. C), Biotine (Vit. B8), Acide Pantothenique (Vit. B5), Acide Folique (Vit. B9), Inositol (Vit. I), Nicotinamide (Vit. B3), Pyridoxine (Vit. B6), Riboflavine (Vit. B2), Thiamine (Vit. B1), Tocopherol (Vit. E), Retinol (Vit. A), Vitamine B12]

6 CO-ENZYME | Stimulation von Stoffwechselprozessen
TPP (Co-carboxylase), CoA, FAD, NAD, NADP, UTP

6 NUKLEINSÄUREN | Stimulation von Stoffwechselprozessen
Deoxyadenosin, Deoxycytidin, Deoxyguanosin, Deoxythymidin, Methylcytosin

5 ANTI-OXIDANTIEN & GLUTATHION
Abwehr gegenüber freier Radikale

24 AMINOSÄUREN | Unterstützung bei der Bildung von Elastin & Kollagen

[Acide α-amino-butyrrique, Alanine, Arginine, Asparagine, Acide Aspartique, Cystine, Glutamine, Acide Glutamique, Glycine, Histidine, Hydroxyproline, Isoleucine, Leucine, Lysine, Methionine, Ornithine, Phenylalanine, Proline, Serine, Taurine, Threonine, Tryptophane, Tyrosine, Valine]

6 MINERALIEN | Gewährleistung des Gleichgewichts im Zellstoffwechsel

[Kalziumchlorid, Kaliumchlorid, Magnesiumsulfat, Natriumacetat, Natriumchlorid, Natriumdihydrogenphosphat]

HYDRATION MIT M-HA® 10

PURE HYALURONSÄURE

TIEFENHYDRIERUNG
STRAHLKRAFT
ELASTIZITÄT
FEINE FÄLTCHEN & LINIE

M-HA® 10 enthält nicht vernetzte Hyaluronsäure, die für eine sofortige Hydratation des Hautgewebes sorgt.

Der natürliche Feuchtigkeitsgehalt des Gewebes wird wiederhergestellt und die Haut beeindruckt mit neuer Festigkeit und intensiver Ausstrahlung.



**GESICHT - HALS -
DEKOLLETÉ -
PERIORBITALE REGION**

Viskoelastische Lösung zur Hydratation. Molekulargewicht > 1, 1 Mio. Dalton.

Sehr nah an nativer, körpereigener HA für eine hohe Bioaffinität.

NANOSOFT™
FÜR AREALE MIT EINER HAUTDICKE <1 MM

NANOSOFT™ BY FILLMED,
EINE ECHE REVOLUTION
IN DER ÄSTHETIK

KONTROLLIERTE & SICHERE
INTRADERMALE APPLIKATION
3 kristalline Mikronadeln (0,6mm Länge)

EINFACHE HANDHABUNG
Blaue Markierung zur Orientierung

KOMPATIBILITÄT
Verwendung mit jeder
herkömmlichen Spritze

ZERTIFIZIERTES MEDIZINPRODUKT
(CE 0344)

NANOSOFT™, DIE FEINSTE NADEL IN DER BRANCHE

FEINER ALS EINE HERKÖMMLICHE INJEKTIONSNADEL ZUR INTRADERMALEN APPLIKATION

Verpackung mit 30 sterilen Nadeln, Sterilisation durch EtO (Ethylenoxid)

EMPFINDLICHE ZONEN -
SCHWER BEHANDELBAR
DIE HÄUFIGSTEN WÜNSCHE
DER PATIENTEN

IHR HAUTBILD &
IHRE
AUSSTRAHLUNG



48% DUNKLE
AUGENRINGE

35% KRÄHENFÜSSE

Erste Areale die Alterungs-
erscheinungen aufweisen



35% FÄLTCHEN UM
DEN MUND UND
DIE LIPPEN

Kontinuierliche Bewegung




27% Hals

Schwierig wirksam zu behandeln

ZUR BEHANDLUNG
MIT DER NANOSOFT™:
AUGENKONTUR -
PERIORALBEREICH -
HALS & DEKOLLETÉ

NANOSOFT™

VORTEILE IM ÜBERBLICK

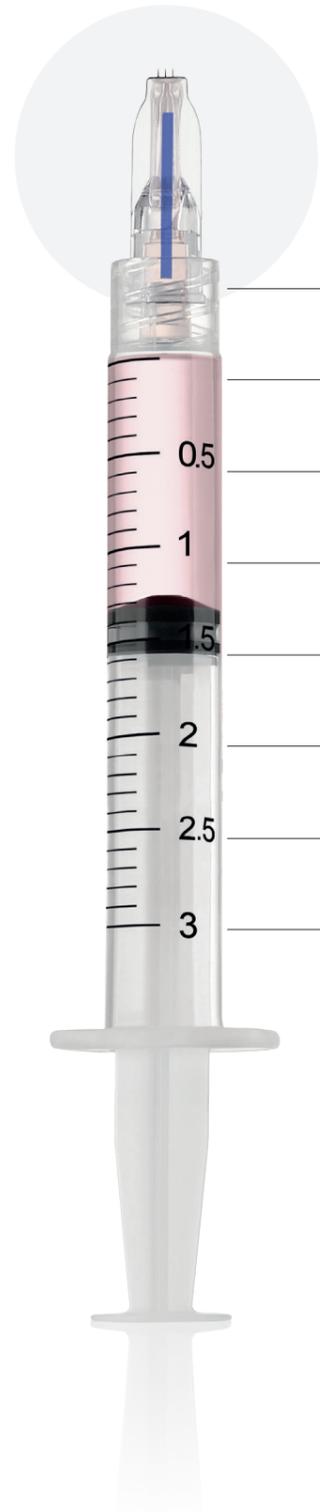


- SENSIBLE AREALE BEHANDELN
- NAHEZU SCHMERZFREI
- OPTIMALE SICHERHEIT
- MINIMALES HÄMATOMRISIKO
- WENIGER TRAUMATISCH
- GLEICHMÄSSIGE QUADDELN
- EINHEITLICHE INJEKTIONSTIEFE
- LEICHTES & SCHNELLES VERFAHREN

NANOSOFT™ & NCTF® 135 HA

SPEZIELL FÜR DÜNNE HAUT

ZEITLICHE DIFFUSION VON NCTF® AUS DEN QUADDELN

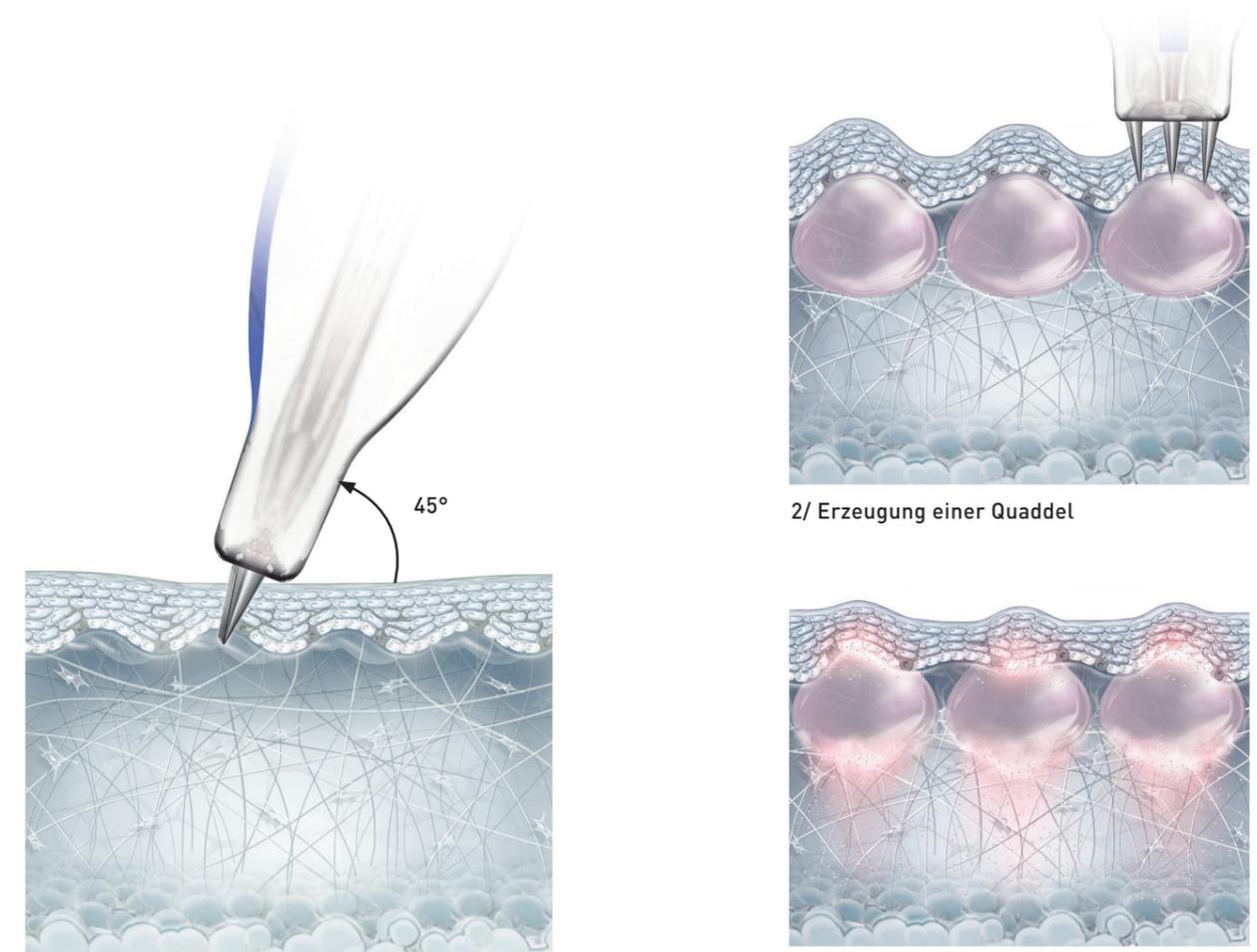


1/ Injektion von NCTF® in die obere Dermis

2/ Erzeugung einer Quaddel


3/ Zeitliche Diffusion von NCTF®

4/ Die Quaddeln klingen nach spät. 24h ab


ANWENDUNG VON NANOSOFT™

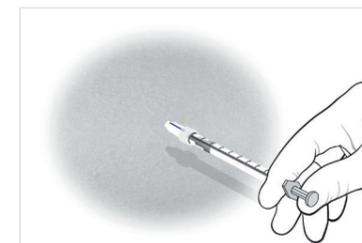

1/ Die blaue Markierung muss zu Ihnen gerichtet sein.

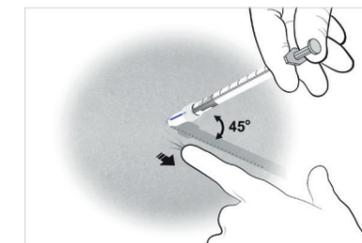

2/ Spannen Sie die Haut und stechen Sie die NANOSOFT™ in einem Winkel von 45° ein.

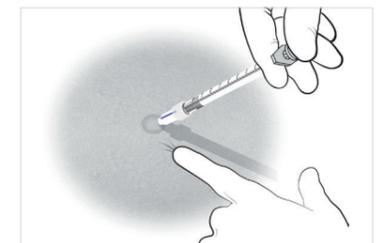

3/ Injizieren Sie langsam und rechnen Sie mit einem starken Widerstand, es bildet sich eine winzige Quaddel. Wiederholen Sie diesen Vorgang jeden Zentimeter, um das gesamte Areal

WISSENSCHAFTLICH ERWIESEN

SICHTBARE ERGEBNISSE BEREITS NACH 1 SITZUNG

PERIORBITALREGION



by Dr. Valérie PHILIPPON

NCTF® 135 HA INJIZIERT

HALS



by Dr. Riekie SMIT

NCTF® 135 HA INJIZIERT



by Dr. Riekie SMIT

VORHER



by Dr. Riekie SMIT

NACH 1 BEHANDLUNG MIT NCTF® 135 HA

SICHTBARE VERBESSERUNG DER HAUTQUALITÄT

Standardisierte Fotodokumentation⁽⁸⁾

+49% GLOW



VORHER



NACH 3 SITZUNGEN

-43% TIEFE DER PERIORBITALEN FALTEN



VORHER



NACH 3 SITZUNGEN

-59% PORENGRÖSSE



VORHER



NACH 3 SITZUNGEN

⁽⁸⁾ Klinische Bewertung der Anti-Aging-Wirkung der Mesotherapie mit NCTF® 135 HA bei gesunden Freiwilligen, 2014. Offene, einzentrache und prospektive Studie. 20 Patienten eingeschlossen (im Durchschnitt 49,25 Jahre alt), 2 davon von ihnen verließen die Studie. 3 Sitzungen im Abstand von 15 Tagen und 2 Sitzungen im Abstand von 30 Tagen.


FILLMED hat ein Portfolio von Protokollen entwickelt, die für jeden Patienten, jeden Alters und jede Anforderung geeignet sind. Von der Prävention über Medical Highlighting bis zur Wiederherstellung - stets nach dem „Less-is-More Pro-Ageing Prinzip“ von ART & SCIENCE by FILLMED.

VON DER OBERFLÄCHE IN DIE TIEFE

NANOSOFT™ (CE 0344) ist ein Medizinprodukt, das nur von autorisierten Anwendern verwendet werden darf. NCTF® 135 HA (CE0297) sind injizierbare Medizinprodukte. Sicherheitsinformationen entnehmen Sie bitte der Gebrauchsanweisung des jeweiligen Produkts. Kontakt zur Meldung einer möglichen Nebenwirkung/eines Sicherheitsproblems: vigilance@fillmed.com.

AUGEN

LEUCHTKRAFT & HYDRATION

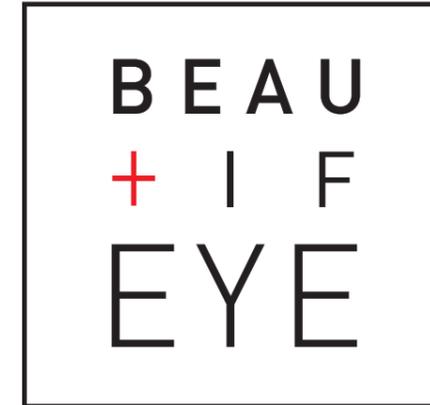

„BEAUTIFEYE™“

ein Behandlungskonzept für den Bereich rund um die Augen. Mit diesem Protokoll können Knitterfältchen, altersbedingte Pigmentierungen (SKIN PERFUSION BRIGHT PEEL) und Schatten sowie die Hautqualität in diesem früh alternden Areal verbessert werden. Idealerweise werden 3 Sitzungen im Abstand von 2-3 Wochen mittels Injektion von NCTF 135 HA mit der NANOSOFT Triple-Nadel durchgeführt.

HALS

REVITALISIERUNG & VERJÜNGUNG



„BIONUTRINECK™“

der Hals ist eine häufig vernachlässigte, delikate Zone. Mit diesem Protokoll wird der Bereich je nach Ausgangsbefund umfassend mit Biorevitalisierung (NCTF 135 HA) und optional in Kombination mit einem Hydratisierungsbooster (M-HA 10) behandelt. Horizontale Halsfalten werden korrigiert und es stellt sich eine Verbesserung des Hautbildes sowie Straffheit der Region ein. Die Kombination mit Peeling (SKIN PERFUSION) und NANOSOFT Triple-Nadel wird für die 2-3 Sitzungen im Abstand von 2-3 Wochen empfohlen.

GESICHT

STRAHLKRAFT & GLOW



„BIONUTRIGLOW™“

ein Konzept, welches die Strahlkraft des gesamten Gesichts wiederbelebt. Durch die Kombination von Peeling (SKIN PERFUSION) & Biorevitalisierung (NCTF 135 HA) lässt sich in nur 2-3 Sitzungen die Hautqualität signifikant verbessern. Auch in Kombination mit Microneedling möglich.

GESICHT


PROJEKTION, HAUTTONIZITÄT & -DICHTe



„BIONUTRILIFT™“

ein Konzept zur Behandlung des Mittelgesichts durch altersabhängige Fillerinjektion/en (ART FILLER) in Kombination mit einem Produkt zur Biorevitalisierung (NCTF 135 HA). Beide Produkte werden bei diesem klinisch nachgewiesenen Protokoll subdermal mittels Kanüle in Fächertechnik appliziert. Die Patienten erhalten einen Liftingeffekt durch die Volumenoptimierung im Mittelgesicht und eine nachhaltige Verbesserung der Hautqualität – bei subdermaler Applikation von NCTF 135 HA vor allem der Tonizität & Dichte.

FILLMED DE ONLINE
Informationen & Videos

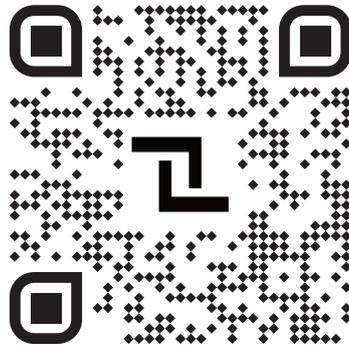

BEAUTY
IS AN ART WE
MADE IT A SCIENCE

EXKLUSIVER FILLMED LABORATOIRES
PARTNER IN DEUTSCHLAND & ÖSTERREICH

NOVIA
E S T H E T I C

NOVIA GMBH
Am Lohmühlbach 14 | D-85356 Freising
Tel.: +49 (0) 8161 96 99 4-0 | Fax: +49 (0) 8161 96 99 4-95
info@novvia.de | www.novvia.de

Laboratoires FILL-MED - Registered Trademark - 2-4, rue de Lisbonne - 75008 Paris - Tel. : +33 (0)1 88 40 12 80 - www.fillmed.com

NANOSOFT™ [CE 0344] ist ein Medizinprodukt, das nur von autorisierten Anwendern verwendet werden darf. M-HA® 10, NCTF® 135 und NCTF® 135 HA [CE0297] sind injizierbare Medizinprodukte. Sicherheitsinformationen entnehmen Sie bitte der Gebrauchsanweisung des jeweiligen Produkts. Kontakt zur Meldung einer möglichen Nebenwirkung/eines Sicherheitsproblems: vigilance@fillmed.com.